



En sikker og konfigurerbar seng der løbende kan tilpasses dit barns behov

Invacare **ScanBeta**_{NG} pædiatrisk seng leveres i 3 størrelser og den er perfekt til børn i alderen 3 til 12 år. **ScanBeta**_{NG} overholder de højeste sikkerhedsbestemmelser beskrevet i Nordic Requirements Specifications. Dette betyder bl.a., at ingen afstande er over 60 mm på sider og liggeflade. Både liggefladens funktionalitet og siderne kan konfigureres individuelt og dette kan op- eller nedjusteres løbende i overensstemmelse med behovsudviklingen. Et attraktivt design sikrer at denne høj kvalitets seng kan passe ind i alle hjem eller institutioner.



Trusted Solutions, Passionate People





Stringente specifikationer

Standard konfigurationer af *Invacare ScanBeta^{NG}* er testet efter strenge retningslinjer i Nordic Requirement Specifications. Sengens design er blevet til med sikkerhed som højeste prioritet og *ScanBeta^{NG}* sengen overholder alle gældende regulativer og sikkerhedskrav.

Konfiguration

Liggefladen på de 3 standard størrelser er udviklet i overensstemmelse med antropometriske analyser, mhp at optimere barnets liggekomfort. Liggefladen kan, afhængig af individuelle behov, konfigureres så den bliver helt eller delvis elektrisk betjent.

Der findes en bred vifte af muligheder: Foldedøre, fastesider, tremmer og meget andet. Op- eller nedgraderinger, i overensstemmelse med udviklingen i barnets behov, er ligeledes en del af sortimentet. Dette sikrer at individuelle behov kontinuerligt kan tilgodeses.

Ergonomisk

Højden kan indstilles fra 300 - 850 mm. Dette muliggør at børn selv kan komme ind og ud af sengen når dette er nødvendigt. Al nødvendig sikkerhed og komfort er medtaget i *ScanBeta^{NG}*. Således er sengen

højdejusterbar og den leveres som standard med låsbar håndbetjening. Endvidere kan sengen som option leveres med centralbremse og flere andre tilpasninger.

Egenskaber



Længden på de enkelte dele af liggefladen er optimeret gennem anvendelsen af antropometriske statistikker for børn. De 3 standard størrelser er specielt designet så de passer til børn i aldersgruppen 3 - 12 år.



Den enkle lette håndbetjening leveres som standard med individuelt låsbare funktioner med henblik på at øge sikkerheden.



Snaplåse løsner enkelt liggefladen fra understellet med henblik på at sikre enkel håndtering.

Tilbehør



ScanBeta^{NG} med 400 mm nedfældbare tremmesider

Tremmer, attraktiv bøge finish og dobbelt låsemekanisme mhp. øget sikkerhed.



ScanBeta^{NG}, med 400 mm nedfældbare plexisider

Plexi glas, og dobbelt låsemekanisme mhp. øget sikkerhed.



ScanBeta^{NG} med 400 mm høje døre

Tremmer, attraktiv bøge finish og døre med sikker låsemekanisme, der åbner 180°.



ScanBeta^{NG} med 800 mm høje foldedøre

Tremmer, attraktiv bøge finish og foldedøre med sikker låsemekanisme, der åbner 180° og minimerer pladskrav.



Konfiguration af liggefladen

Liggefladens funktionalitet kan op- eller nedjusteres i takt med behov: tilføjelse/fjernelse af motorer og rastofix (se skema side 4).



Polstring

20 mm tyk indvendig polstring af gavle og sider.



Sikker låsemekanisme

Et sikkert låsesystem som alene kan åbnes ved brug af 2 forskellige låsefunktioner.







Dekorationer (klæbe mærkater)

Vælg mellem flere forskellige dekorationer - indvendigt eller udvendigt.



Invacare ScanBeta_{NG} - mulige liggefladekonfigurationer






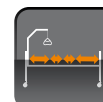

Fast	
Motor på ryg og fast bendel.	
Motor på ryg og manuel betjent bendel.	
Motor på ryg og lår. Manuel betjent bendel.	




* Liggefladen er den samme for hver af 3 størrelser de er blot konfigureret med eller uden motor eller rastofix.

Invacare ScanBeta_{NG} - sider og låger

	Faste sider	Nedfældbare sider	Låger	Foldedøre
400 mm høje	✓	✓	✓	✓
800 mm høje	✓		✓	✓

Tekniske data

							
	Udvendig bredde	Indvendig bredde	Udvendig længde	Indvendig længde	Højdejustering	Liggeflade dimensioner	Ryg vinkel
600 x 1400 mm	680 mm	620 mm	1480 mm	1400 mm	300 - 850 mm	620-70-210-460 mm	0° - 73°
700 x 1600 mm	780 mm	720 mm	1680 mm	1600 mm	300 - 850 mm	670-150-220-520 mm	0° - 73°
800 x 1800 mm	880 mm	820 mm	1880 mm	1800 mm	300 - 850 mm	750-190-270-550 mm	0° - 73°

			
	Lår vinkel	Ben løft	Max. brugervægt:
600 x 1400 mm	0° - 36°	0° - 26°	70 kg
700 x 1600 mm	0° - 31°	0° - 24°	SWL: 100 kg
800 x 1800 mm	0° - 27°	0° - 26°	

Invacare A/S
 Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
 Denmark
 Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001
 denmark@invacare.com
 www.invacare.dk

© 2016 Invacare International Sàrl
 All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

ScanBeta NG - DK - 04/2016



Yes, you can.®



Perlevid (metal)

Bøg (træ)